

ハナクリーン EX

取扱説明書を必ず参照して下さい

使用に際して、この説明文書を必ず読んで下さい
また必要な時に読めるよう大切に保管して下さい

警告

- ・洗浄後に鼻を軽くかむ必要があるため鼻が充分にかめない方は使用できません。
- ・洗浄液が気管に入ったり耳への圧力を軽減させたりする為、必ず「エー」と発声しながらポンプを押して下さい。
- ・鼻の炎症 (鼻づまり等) のひどい時、耳に疾患のある時は医師に相談の上使用して下さい。
- ・お子様が使用される際は
保護者の指導の下で使用して下さい。
鼻を充分にかめないお子様は使用しないで下さい。
風邪をひいている時、鼻詰まりの酷い時は使用しないで下さい。
鼻や耳に疾患のある場合は医師に相談の上使用して下さい。

【形状・構造及び原理等】


< 構造 >

本体



- ・本体寸法 : W135 × D74 × H183
- ・本体重量 : 220g

ポンプ

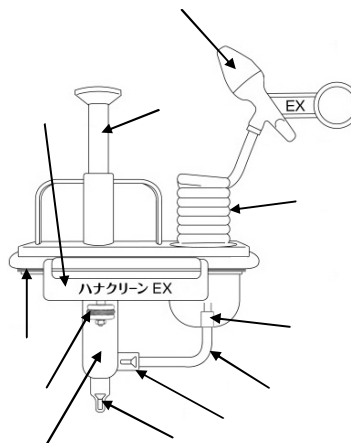

ノズル

【シャワー・ストレート切換式】

コイルホース

ジョイント (ホース部)

L 字ホース

ジョイント (弁付)

パイプ先端 (弁付)

パイプ

O リング

パッキン

フタ止め

ピストン

ボトル (300ml)

液晶温度計

ボトル



材質

ポンプ本体・ノズル : ABS 樹脂

ボトル : AS 樹脂

コイルホース : ウレタン

液晶温度計 : PET

< 作動原理 >


洗浄液を作りボトルとポンプをセットする。

ポンプを押す事によりノズル先端から洗浄液が噴出される。

ポンプを押す力により水圧の調節が可能。

< 付属品 >

サーレ MP (30 包入) ・ 収納ケース

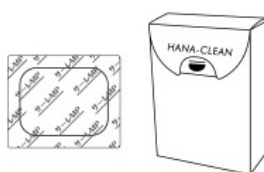

・サーレ MP

洗浄液の濃度を調節する

1 回に 1 包を入れて使用

成分 : 塩化ナトリウム・メントール・ペパーミント

・収納ケース

本体を収納するケース

【使用目的】

鼻腔内の洗浄

【操作方法又は使用方法等】

準備

初めてお使いになる時は一度水を通し、全体を軽く水洗いしてから使用して下さい。

フタ止めを外し、ポンプ本体をボトルから取り外します。

ボトルに 300ml の温水（40～42℃）を用意します。

A.給湯器で温度設定ができる方

ボトルの 300ml ラインまで 40～42℃のお湯を入れます。

B.給湯器で温度設定ができない方

ボトルの冷水ライン「C」まで水を入れ、熱湯ライン「H」まで熱湯（ポットのお湯）を注ぎ足します。

温度計で適温（40～42℃）であることを確認します。

洗浄液が熱いと感じる場合は、38～40℃位で使用して下さい。

付属のサーレ MP を 1 包入れてよく溶かします。

ポンプ本体をボトルにセットし、フタ止めをしっかりと固定します。

ノズルをお好みにセットします。

A.シャワー・・・やさしく洗いたい方

B.ストレート・・・しっかり洗いたい方

購入時はシャワーにセットされています。ストレートに切り

替える際はノズル先端を左に回して引き上げ、右に回して固定して下さい。

洗浄方法

洗面所や浴室などで行うか、受け皿を用意して下さい。

ポンプを数回押して洗浄液を充填して下さい。

ノズルを軽く鼻にあて、前かがみになり「エー」と発声しながらポンプを 3～5 回押し、洗浄液がなくなるまで左右交互に鼻腔内を洗浄します。

鼻の状態により洗浄液が反対の鼻や口からでてくることがあります。

洗浄液は 300ml を使い切るのが効果的ですが、もし残ってしまった時は必ず捨てて下さい。

洗浄後は、鼻を軽くかんで下さい。

洗浄後しばらくして鼻の奥に残った洗浄液が出てくることがありますが問題はございません。気になる方は頭を軽く振って洗浄液を出して下さい。（出方には個人差があります）

使用後はお手入れをして下さい。

・ノズル交換のしかた

ノズルを左に回して取り外し、交換用ノズルを取り付けます。

【使用上の注意】

・ノズルで鼻を完全に密閉しないで下さい。

[耳への圧力を軽減するため]

・熱湯を入れる際、やけどに気を付けて下さい。

・ボトルには必ず水を先に入れて下さい。

・洗浄液は 1 度で使いきり、残った場合は捨てて下さい。

・使用後は器具をよく洗い乾燥させて下さい。

・鼻洗浄以外には使用しないで下さい。

・洗浄液の温度は 40～42℃の範囲で使用して下さい。

・温度計は 38～44℃以外では表示されません。

・水量メモリは目安です。水温に合わせて適宜調節して下さい。

・洗浄する際は必ず付属のサーレ MP を使用して下さい。

[洗浄液の濃度を調節し、鼻粘膜への刺激を減らす為]

・原則として本人以外は使用しないで下さい。本人以外が使用する場合は交換用ノズル（別売）を使用して下さい。

・洗浄に慣れるまではポンプを強く押さないで下さい。

・使用中に何らかの異常があった場合には直ちに使用を中止して医師に相談して下さい。

【貯蔵・保管方法】

・よく乾燥した後、直射日光や高温多湿を避けて保管して下さい。
水分が残っているとカビなどの原因になります。

・使用を再開する時は一度水を通し、全体を軽く水洗いしてから使用して下さい。

【使用期限】

・標準的な使用期間の目安

ハナクリーン EX 本体 : 3～5 年〔自己認証による〕

サーレ MP : 5 年〔自己認証による〕

【保守・点検に係る事項】

使用後のお手入れ（毎回）

ボトルに水を入れ、ポンプを押して中に残った洗浄液を洗い出し、ホース内の水分が取り除けるまで空押しします。

ノズル部分をよく洗い、全体も軽く洗ってから自然乾燥して下さい。

汚れが気になる時は中性洗剤で洗い、よく水ですすいで下さい。

ノズル・ホースの中の汚れは洗うことが難しいため、定期的な交換をオススメします。

煮沸はできません。

本体を消毒する際には殺菌消毒剤「次亜塩素酸ナトリウム」などを使用して下さい。

パイプ内部のお手入れ（月に1度位）

ポンプ動作が安定し、衛生的にお使いいただけます。

L字ホースを下に引いて外します。

パイプを左に止まるまで回し（ - 1 ）

下に引き抜きます。（ - 2 ）

パイプを強く回しすぎると破損する

おそれがあります。

パイプ内部とゴムパッキン部分を柔ら


かい布などで拭いて下さい。

白色ワセリン（別売有）をゴムパッキン

に塗って下さい。

パイプを元の位置に差し込み右に止まる

まで回し、L字ホースをしっかり取り付けて下さい。

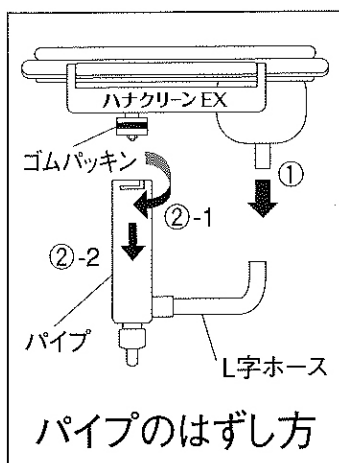

【包装】

・1台 / 箱

【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称及び住所等】

製造販売業者の氏名又は名称

株式会社 東京鼻科学研究所

住所

東京都目黒区鷹番 2-10-7

電話番号

03-3792-2460

【部品・修理・その他のお問い合わせ】

株式会社 ティー・ビー・ケー

〒152-0004 東京都目黒区鷹番 2-10-7

TEL 03-3792-5080 FAX 03-3792-1323

受付時間 9:00～17:30（土 日 祝日を除く）